

LENS INSERTION

Your AirFlex hybrid contact lenses should be renewed every six (6) months please discuss this with your eye care specialist. Before handling your lenses, always wash your hands thoroughly.



Before insertion check your lens is clean and in good condition. In case the lens seems damaged, do not use and contact your eye care specialist.

Rinse your lens. Place the lens in the palm of your hand and rinse it with the contact lens solution that is advised by your eye-care specialist in order to make sure the surface is free of any surface deposits. Never use tap water.

Look at yourself in a mirror. Place your middle finger close to your lower eyelashes and pull down the lower lid, and use the other hand to lift the upper lid. Place the lens on your forefinger close to your eye and place the lens carefully on your eye.

Gently release the lids and blink to clear the tears.

Make sure your lens is well centered on your eye. If you notice air bubbles, or in the case of lens decentration or discomfort, remove the lens and re-insert following same procedure.

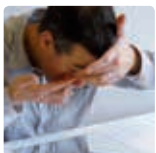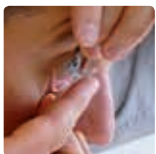

LENS REMOVAL

Look at yourself in a mirror. Place your forefinger on the lower lid and the forefinger of the other hand on the upper lid. Press lightly on your lower eyelid and move the eyelid up in order to lift the lens.

Gently catch the lens between your thumb and forefinger. Be careful when handling your lenses do not to pinch the lens.


Be careful not to damage the lens with your nails.

The lens should easily come out of your eye. If your lens feels as though it is stuck on your eye. See your eye-care specialist in case removal is difficult.

The use of a contact lens suction removal plunger may make it easier to remove your lenses until you feel more confident at lens removal. In this case, the removal plunger must never be placed in the centre of the lens, but on the soft peripheral zone, in the lower part.

Each lens is conditioned in a container with a decontamination solution. The following information figures on the label :

Name and address of the manufacturer
- Refer to the leaflet inside
- Commercial reference of the lens
- Expiry date for 1st use
- Serial number of the lens
- If the packaging is damaged do not use
Conformity with all relevant safety and security requirements and notified body number

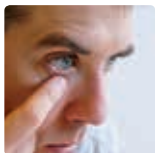

LENS CARE

For the daily care, use a multi-purpose solution for soft contact lenses, as recommended by your eye-care specialist. AirFlex lenses are compatible with peroxide solutions. Always use the dedicated lens holders and carefully follow the neutralization procedure.

Before cleaning your lenses, empty your storage case. Never reuse the remaining solution in your case.

When removing your lens, rub it between your thumb and your forefinger for about 20 seconds with a multipurpose solution. Or, in case of oily tears and greasy deposits, clean your lenses with a cleaning solution for soft lenses only, and then rinse the lens.

Place the lens in its storage case and fill it with multipurpose solution recommended by your eye-care specialist.

If you do not wear your lenses for a week, or more always replace the storage solution in the lens case with fresh multipurpose solution before wearing your lenses.

Always carefully read and follow the instructions of the solutions you use.

Follow the instructions of your eye-care practitioner.

INSTRUCTIONS

Always put on your make-up after having placed the lenses on your eyes.


Ocular complications due to lens wearing are rare if you follow the instructions of your eye-care specialist. However, if any one of the following symptoms occurs, remove your lenses immediately and consult your eye-care specialist:

- A red or itching eye
- A feeling of discomfort or soreness
- An unusual change of vision
- An increased sensitivity to light
- Any watering of the eye or symptom of dry eye

If you feel any discomfort, remove your lens and rinse it with a rinsing solution. Consult your eye-care practitioner before using an eyewash.

The lens must never be allowed to dry out in storage and must be stored away from any sources of heat.

Scan the QR code for more information and videos

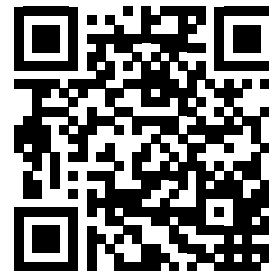

Manufacture: LCS SAS, 14000 Caen - France
Distribution SwissLens SA , 1008 Prilly Switzerland

Zeskanować kod QR, aby uzyskać więcej informacji i filmów



Producent: LCS SAS, 14000 Caen - Francja
Dystrybucja: SwissLens SA , 1008 Prilly Szwajcaria

ZAKŁADANIE

Soczewki hybridowe AirFlex należy wmontować co sześć miesięcy.

Przed kontaktem z soczewkami należy zawsze umyć ręce.

Przepłucz soczewkę. Położ soczewkę na dionii i wypłucz pod kątem zalecanym producenta, aby usunąć wszelkie nieczystości. Nie można płukać soczewek bieżącą wodą.

Społżz na swoje odbicie w lustrze. Użyj pędca środkowego, aby podchylić powiekę do wnętrza i drugiej ręki, aby podsunąć powiekę górną.

Zbliż soczewkę do oka i nałoż ją delikatnie na powiekę. Puszcz delikatnie powiekę! kilka razy zamrugaaj, aby usunąć nadmiar łez.

Sprawdź ułożenie soczewki na oku. Jeżeli soczewka wyszła z oczu, sprawdź powierzenie w razie problemu z wyposed- lub kwanieniem dyskomfortu, wymij soczewkę i załóż ją ponownie, postępując tak samo.



ZDEMOWANIE

Społżz na siebie w lustro, umieść palec wskazujący na powiece dołnej i palec wskazujący drugiej ręki na powiece górnej.



Użwanie przysawki może pomóc w zdjęciu soczewki. W takim przypadku nie można umieścić przysawki na środku soczewki, lecz na miękkim brzegu, w dolnej części.

Każda soczewka jest umieszczana w opakowaniu z etykietae zawierającą informacje: -Nazwa i adres producenta -Należy przeczytać ulotkę -Nazwa handlowa soczewki -Data ważności przed pierwszym użyciem -Numer seryjny soczewki -Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone -Zgodność z wymogami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa oraz numer przyjmującego zgłoszenie

PIELĘGNACJA

Na co dzień używaj produktu wielofunkcyjnego do soczewek miękkich. Do soczewek nadają się również produkty na bazie nadtlenku wodoru. Należy dopłynować, aby właściwie stosować odpowiednią pojemnik i procedurę neutralizacji. Przed przysięgnięciem do dezynfekcji soczewki opłódnij pojemnik na soczewki. Nigdy nie używaj wczesniejszego rozwiązania.

Po zdjęciu soczewki, masuj ją przez około 20 sekund między kciukiem a palcem wskazującym przy użyciu płynu wielofunkcyjnego lub, w przypadku twardych łez z lub wyjąznie przy użyciu płynu do mycia soczewek miękkich, a następnie opłucz ją. Umieść soczewkę w pojemniku, a następnie napełnij go płynem wielofunkcyjnym zgodnie z wskazaniami dotyczącymi użycia tego produktu.

Wykonuj makijaż po nałożeniu soczewek. Problemy okulistyczne związane z noszeniem soczewek występują rzadko, jeżeli stosujesz się do zaleceń specjalistów. Niemniej jednak jeżeli zabobsewniejsza następujące objawy, zdejmij soczewki i skontaktuj się ze specjalistą: -czwone lub podrażnione oko -uczucie ciężego dyskomfortu lub uwierania -niepymowa zmiana widzenia -większa wrażliwość na światło -łzawienie lub uczucie suchości

Skonsultuj się ze specjalistą przed użyciem Soczewek nie należy zostawiać na suchu i zdaty do depia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zastosuj się do wskazanek swojego specjalisty. Zastosuj się do op do awaryjnych tam wskazanek. Zastosuj się do zaleceń specjalistów. Niemniej jednak