


SwissLens

simplicity without limits

Toriflex

Die torische formstabile Kontaktlinse



- einfache Anpassung durch optimierte Rückflächengestaltung
- vereinfachte Kontaktlinsenberechnung mit Hilfe des Anpassassistenten 
- als bitorisch, sowie Fronttorus mit Prismen-Stabilisierung erhältlich
- optimiertes Randprofil mit hohem Tragekomfort
- wie gewohnt kombinierbar mit Service+

Neu

Toriflex


Zwei Designs für eine effizientere Anpassung

Bitorische Ausführung (BT)

- torische Rückfläche entsprechend der Hornhauttorizität
- torische Vorderfläche entsprechend der Refraktionswerte und Rückflächenkompensation
- bei Hornhauradiendifferenz $\geq 4/10$ mm
- Markierung in 0° und 180°




anzustrebendes Fluobild

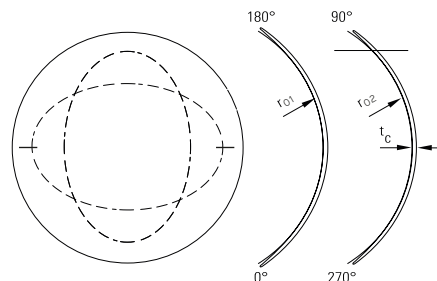

Vordertorisch-prismatische Ausführung (TP)

- sphärische Rückfläche bei geringer Hornhauttorizität und innerem Astigmatismus
- torische Vorderfläche entsprechend der Refraktionswerte und Rückflächenkompensation
- prismatisches Element zur Stabilisierung
- bei Hornhauradiendifferenz $< 4/10$ mm
- Markierung in 270°

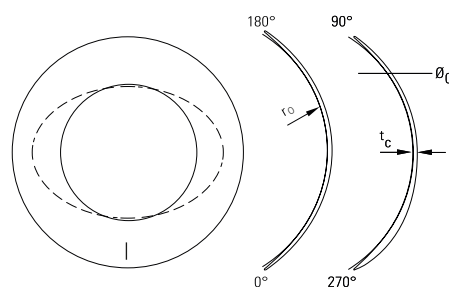

Technische Daten

Toriflex BT

bitorische formstabile Kontaktlinse




Toriflex TP

vordertorisch-prismatische formstabile Kontaktlinse

	Parameter	
	min	max
Durchmesser	8.00 ->	10.00 mm
Radius	6.00 ->	9.00 mm
Sphäre	-30.00 ->	+20.00 dpt
Zylinder	plan ->	-8.00 dpt
Achse	0° ->	180°
Abflachung	Standard / (-) / (+)	
Prisma	1.5 cm/m (Standard) oder 2.0 cm/m	

SwissLens

SwissLens SA
Chemin des Creuses 9
CH-1008 Prilly

 Tel: 0180 566 68 16
 Tel: 0810 23 23 16
 Tel: +41 21 620 06 66

Fax: +41 21 620 06 65
lens.info@swisslens.ch
www.swisslens.ch